

Für die Anwendung in Klinik und Praxis:
Accu-Chek Safe-T-Pro Uno
und **Accu-Chek Safe-T-Pro Plus**



Accu-Chek Safe-T-Pro Uno
200 Stück
Materialnummer 05888662150
PZN 06143663



Accu-Chek Safe-T-Pro Plus
200 Stück
Materialnummer 03603539150
PZN 01754184

Sie wollen mehr erfahren?

Unsere Mitarbeiter im Accu-Chek Kunden Service Center sind für Sie da!
Kostenfreie Telefonnummer 0800 4466800 (Mo-Fr, 08:00-18:00 Uhr).
Oder besuchen Sie unser Online-Portal unter www.accu-chek.de,
unsere Community www.mein-buntes-leben.de oder unsere Facebookseite auf
www.facebook.com/accuchekde

ACCU-CHEK und SAFE-T-PRO sind Marken von Roche.

© 2021 Roche Diabetes Care Deutschland.

accu-chek.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

052399567990 © 0321

ACCU-CHEK®

Roche

EINMALSTECHHILFEN SICHER UND HYGIENISCH



ACCU-CHEK SAFE-T-PRO UNO UND ACCU-CHEK SAFE-T-PRO PLUS

Für die sichere und hygienische Blutgewinnung
in Klinik und Praxis

Erfüllen die Anforderungen der TRBA 250¹

ACCU-CHEK EINMALSTECHHILFEN SICHER UND HYGIENISCH

Die Accu-Chek Einmalstechhilfen ermöglichen eine sichere und hygienische Blutgewinnung:

- Die sterile Lanzette befindet sich geschützt im Gehäuseinneren.
- Ein Sicherheitsmechanismus blockiert die Lanzette nach Gebrauch, so dass eine Mehrfachverwendung ausgeschlossen ist.
- Nach Gebrauch wird die komplette Stechhilfe entsorgt; so besteht keine Verletzungsgefahr.
- Sie erfüllen die Anforderungen der TRBA 250.¹

ACCU-CHEK SAFE-T-PRO UNO – Wenn es schnell gehen muss



Schnell und praktisch

- Einstichtiefe 1,5 mm für den sofortigen Einsatz
- Nadeldurchmesser 0,36 mm
- Vorteilhaft bei hohem Patientenaufkommen
- Schnell und sicher eine ausreichende Menge Blut gewinnen – für eine zuverlässige Blutzuckermessung

ACCU-CHEK SAFE-T-PRO PLUS – Für mehr Flexibilität



Individuell und flexibel


- 3 wählbare Einstichtiefen (1,3 mm, 1,8 mm und 2,3 mm)
- Nadeldurchmesser 0,63 mm
- Flexibler Einsatz: für unterschiedliche Hautbeschaffenheiten und benötigte Blutmengen geeignet

EINFACHE BLUTGEWINNUNG IN WENIGEN SCHRITTEN

- Ergonomische T-Form der Stechhilfen erleichtert die intuitiv richtige Verwendung
- Griffige Oberfläche für eine bequeme und sichere Handhabung
- 3-seitiger, hautschonender Lanzettenschliff, geführte Lanzettenbewegung und hohe Lanzettengeschwindigkeit sorgen für sanftes Durchdringen der Haut

Hinweis: Nach einmaligem Gebrauch wird die Stechhilfe komplett entsorgt!

ACCU-CHEK SAFE-T-PRO UNO

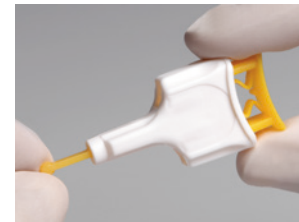

1. Sterilkappe abdrehen



2. Stechhilfe fest auf die Einstichstelle setzen und den Auslöseknopf drücken

ACCU-CHEK SAFE-T-PRO PLUS



1. Sterilkappe abdrehen



2. Stechtiefe bei Bedarf durch Drehen des Einstellringes ändern



3. Stechhilfe fest auf die Einstichstelle setzen und den Auslöseknopf drücken

¹ TRBA 250 Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege