

# Sichere Entsorgung mit der Multi-Safe twin 500 plus

## Die Möglichkeiten der Montage

### Variante A




Deckel zentriert auf das Unterteil der Box aufsetzen. Durch gleichzeitiges Drücken mit beiden Daumen rechts und links neben den Aussparungen im Deckel den Deckel fest auf das Unterteil drücken, bis die Außenkante des gelben Unterteils hör- und sichtbar einrastet (1). Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang rundherum entsprechend auch für die übrigen Aussparungen (2-6).

### Variante B



Deckel auf eine stabile Unterfläche legen und Unterteil der Entsorgungsbox von oben auf den Deckel aufsetzen. Unterteil fest auf den Deckel aufdrücken, sodass die Außenkante des Unterteils rundherum hör- und sichtbar einrastet.

### Tagesdeckel

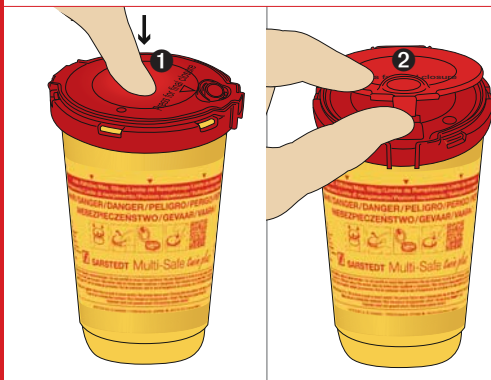

Durch Druck auf die Mitte des Deckels (1) rastet der Verschluss komplett ein, so dass der Tagesverschluss korrekt geschlossen ist.

**Achtung:** beim Öffnen des Tagesverschlusses **nicht** auf den Endverschluss drücken (2).

### Sicherheitshinweise

- Nicht über die markierte Fülllinie befüllen.
- Keine Gegenstände gewaltsam in die Box drücken.
- Nicht mit der Hand in die Box fassen.
- Keine Flüssigkeiten einfüllen.
- Vor Verschluss des Tagesdeckels sicherstellen, dass keine Gegenstände aus der Öffnung ragen.
- Box nicht von außen in irgendeiner Weise zusammendrücken und Box nicht werfen.

# Safe disposal with the Multi-Safe twin plus 500

## Assembly options

### Option A




Centre the lid on top of the bottom part of the box. With your thumbs to the left and right of the gaps in the lid, push the lid onto the bottom part until the outer edge of the yellow bottom part audibly and visually snaps into place (1). Repeat this process for the remaining gaps in the lid (2–6).

### Option B



Put the lid on a stable surface and place the bottom part of the disposal box on the lid from above. Push the bottom part onto the lid so that the outer edge of the bottom part audibly and visually snap into place.

### Day lid

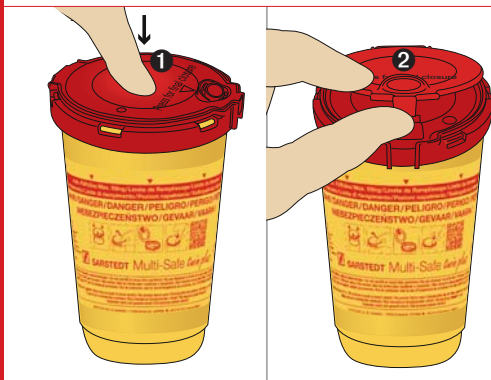

To close the day cap correctly, push the centre of the lid down until the closure snaps into place (1).

**Note:** when opening the day cap do **not** push against the clasp (2).

### Safety instructions

- Do not fill above the marked filling line.
- Do not force items into the box.
- Do not place your hands into the box.
- Do not put any liquids in the box.
- Before sealing the day lid, ensure that no items are projecting through the opening.
- Do not press the box from the outside in any way or throw it around.

SARSTEDT AG & Co. KG  
P.O. Box 12 20  
D-51582 Nümbrecht  
Phone: +49 2293 305 0  
Fax: +49 2293 305 3992  
export@sarstedt.com  
www.sarstedt.com